

Felhasználói kézikönyv
Használati utasítás



Kat. szám: 15.2025.02



Használati utasítás

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

p

Köszönjük, hogy a TFA cég eszközét választotta.

A készülék használata előtt

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- A használati útmutató a készülékhez mellékelve található, vagy letölthető a címről következő oldal: www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Soha ne használja a készüléket a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérő célra.
- Ezen utasítások betartásával elkerülheti a készülék károsodását és a jogai elvesztését egy esetleges meghibásodás esetén, ha az a következőkből ered:
nem rendeltetésszerű használat.
- Gondosan tartsa be az összes biztonsági utasítást!
- Gondosan őrizze meg a használati útmutatót!

C

Köszönjük, hogy a TFA készüléket választotta.

A készülék használata előtt

- Olvassa el figyelmesen a használati utasítást. • A használati utasítás a készülékkel együtt szállítva található, vagy letölthető, hány igen www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Ne használja a terméket a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módon, utasítás.
- A használati utasítás betartásával elkerülheti a termék károsodását és a helytelen használat miatt sérti a fogyasztó jogait amire törvény szerint jogosult vagy.
- Fordítson különös figyelmet a biztonsági intézkedésekre!
- Gondosan őrizze meg a használati utasítást.

É

Köszönjük, hogy ezt a TFA készüléket választotta.

A készülékkel való munka megkezdése előtt

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet. • A felhasználói kézikönyv mellékelve van a készülékhez, vagy letölthető innen www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Ne használja a terméket a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő módon.
- A kézikönyvben leírtak figyelembevételével elkerülheti a termék károsodása esetén, és nem kockáztatja a törvényes jogai elvesztését helytelen használat miatt már nem érvényes.
- Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat!
- Kérjük, őrizze meg az utasításokat biztonságos helyen!

m

Köszönjük szépen, hogy megvásárolta ezt a TFA készüléket.

A készülék használata előtt

- Olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
- A használati utasítás a készülékhez mellékelve található, vagy letölthető innen www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Ne használja a készüléket a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módon, cíók.
- A használati utasítás betartása megakadályozza a készülék károsodását és nem sérti a helytelen használatból eredő, jogilag előre látható hibákra vonatkozó jogait.
- Mindenekelőtt figyeljen a biztonsági figyelmeztetésekre.
- A használati utasítást őrizze meg biztonságos helyen.

j

Köszönjük, hogy a TFA terméket választotta.

Használat előtt

- Olvassa el figyelmesen a következő használati utasítást.
- A felhasználói kézikönyv a készülékhez mellékelve található, vagy letölthető innen www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Ez a termék csak a használati utasításban leírtak szerint használható.
- A kézikönyvben található utasítások gondos elolvasásával és betartásával elkerülheti a készülék károsodását és a jogok elvesztését, amelyek a következőkből eredő károkból erednek: helytelen használat.
- Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra.
- Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

BE

Köszönjük, hogy ezt a TFA készüléket választotta.

A termék használata előtt

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet. • A felhasználói kézikönyv megtalálható a készülékkel együtt, vagy letölthető a következő címről: www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Ezt a terméket kizárólag a jelen használati utasításban leírtak szerint szabad használni, mentek.
- A kézikönyvben található utasítások betartása és követése megakadályozza a hangszer károsodása és a törvényben biztosított jogainak elvesztése helytelen használat miatt fordul elő. • Kérjük, fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra!
- Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából.


P

Köszönjük, hogy ezt a TFA készüléket választotta.




Mielőtt elkezdene használni ezt az eszközt

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- A felhasználói kézikönyv a készülékhez mellékelve található, vagy letölthető innen [weboldal: www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)
- Ne használja a készüléket a leírásban leírtaktól eltérő módon, utasítás.
- Az utasítások betartásával elkerülheti a készülék károsodását, és Fennáll a veszélye annak, hogy nem rendeltetésszerű használat miatt elveszíti törvényes fogyasztói jogait. • Kérjük, fordítson különös figyelmet a biztonsági szabályokra!
- Őrizze meg a használati útmutatót jó állapotban!

1. ábra

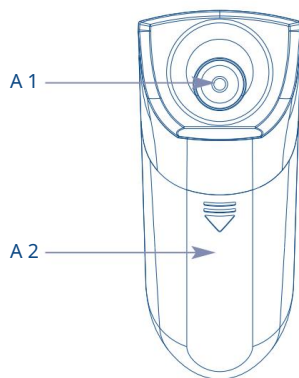

2. ábra

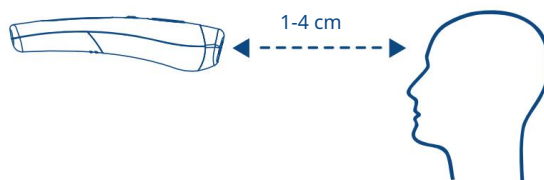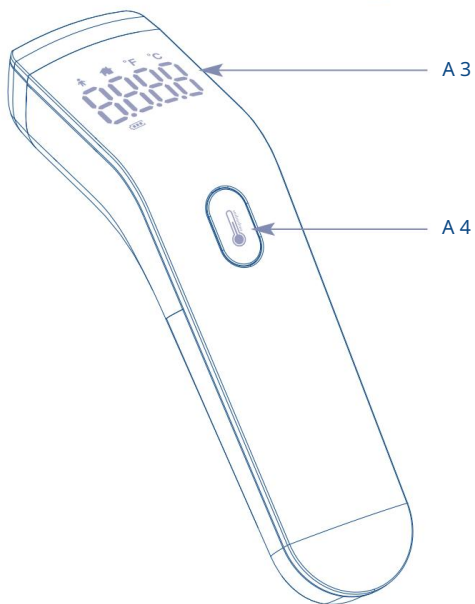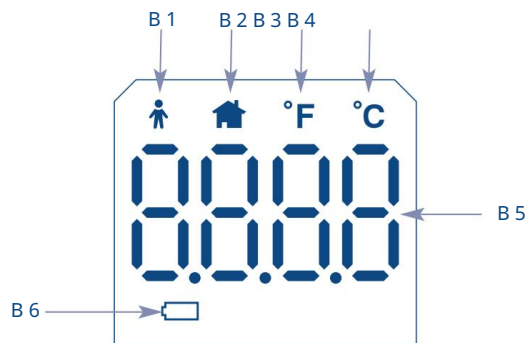

Infravörös homlokhőmérő DT-8807S k

Köszönjük, hogy ezt a [Cégnév] készüléket választotta.
A TFA döntött.

Ez a termék a legújabb infravörös technológián alapul, és képes mérni a testhőmérsékletet.

Felületi hőmérséklet mérésére is használható. A hőmérsékletmérés érintésmentes, egyszerű és gyors.

1. Mielőtt elkezdené használni a készüléket

-  Kérjük, olvassa el a használati útmutatót alaposan.
- A használati utasítás betartásával elkerülheti a készülék és a

A törvényes jótállási jogaira vonatkozó kockázatok a következők révén:
Helytelen használat. Így kezdheti el használni új eszközt ismerkedjen meg, tanulja meg az összes funkciót és alkatrészt, és sajátítsa el az üzembe helyezéshez szükséges fontos részleteket, és hogyan kell használni az eszközt, és tippeket kapni hozzá a meghibásodás.

- Nem vállalunk felelősséget a jelen kezelési utasítások be nem tartásából eredő károkért.

Nincs felelősség. Hasonlóképpen, nem vállalunk felelősséget a helytelen információkért.
Mérések és az ezekből eredő következmények tud.

- Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra!
- Őrizze meg ezeket az utasításokat biztonságos helyen!

2. Szállítási terjedelem

- DT-8807S infravörös homlokhőmérő
- Felhasználói kézikönyv

3. Az Ön biztonsága érdekében

- A készülék kizárólag magánhasználatra készült, biztosan!
- Ne használja a terméket a leírtaktól eltérő módon.
Utasítások láthatók. •

Használat előtt ellenőrizze a hőmérőt.

Sérülés vagy kopás jelei. Használat

Csak akkor használja a készüléket, ha az teljesen működőképes. Tilos a készülék engedély nélküli javítása, módosítása vagy átalakítása.

Infravörös homlokhőmérő DT-8807S k

- Erős elektromágneses mezőkben, például mobiltelefon közelében történő használat meghibásodáshoz vezethet. Tartson minimális távolságot

1 m távolságra az ilyen eszközöktől, amikor ezt az eszközt használja - az volt.

- A hangjelzésig eltelt minimális mérési időt kivétel nélkül be kell tartani.

- Mindig beszélje meg az eredményeket orvosával.

Általános orvos.

- A homlokfelület hőmérséklete eltérő a maghőmérsékletből, szájon át vagy rektálisan mérve lázmérővel. • Ellenőrizze a mérési eredményt hagyományos lázmérővel:

1. ha még nem ismeri a helyes alkalmazást ismerősek
2. ha a mérési eredmény meglepően alacsony, és nem egyezik az érzéseivel
3. újszülötteknél 6 hónapos korig; 4. olyan személyeknél, különösen kisgyermeknél, akik riasztóan reagálnak láz esetén.

Vigyázat!

Sérülésveszély:

- A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek. előfordulhat. Tartsa a készüléket és az elemeket gyermekektől elzárva. Kérjük, csak Felőtt felügyelete mellett használható.
- Az elemek káros savakat és Lenyelés esetén életveszélyesek lehetnek. Gyanítják, hogy lenyeltek egy elemet, vagy más forrásból kerültek a szervezetbe, vegyék Azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne dobja tűzbe az elemeket, ne zárja rövidre őket, ne szerelje szét, és ne próbálja meg újratölteni őket. Robbanásveszély!
- Az elemek szivárgásának elkerülése érdekében a következőket kell tennie: A lehető leghamarabb cserélje ki a lemerült elemeket lesz. Soha ne használj régi és újakat egyszerre. Különböző típusú elemek vagy akkumulátorok.
- Szivárgó elemek kezelésekor viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Infravörös homlokhőmérő DT-8807S k

Fontos termékbiztonsági információk!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, Rezgések és ütések. • Védje a készüléket a nagy vagy hirtelen hőmérséklet-ingadozásoktól. • A gőz, por, füst stb. ronthatja a mérést és károsíthatja a készülék optikai elemeit.

Működési zavarok előfordulhatnak. • A készülék nem vízálló. Óvja a nedvességtől. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

A készülék tisztításához és fertőtlenítéséhez kövesse az alábbi utasításokat. Kérjük, olvassa el az „Ápolás és karbantartás” című fejezetben található utasításokat.

4. Működési elv

- Minden tárgy infravörös energiát bocsát ki. Az optikai detektor érzékeli ezt, digitális kijelzővé alakítja az információt, és így méri a felület hőmérsékletét.

4.1 Testhőmérséklet mérése

- Az alapértelmezett beállításban, testhőmérséklet-mérési módban, Az artériák által kibocsátott infravörös hőt mérik. a homlok alatt és a készülék átszámítja a szájon át mért testhőmérsékletet. A mérési eredmény 1 másodpercen belül megjelenik a kijelzőn. Az érintésmentes mérési módszernek köszönhetően például a testhőmérséklet... A csecsemők alvásának megzavarása nélkül is megmérhetők. Sokan úgy vélik, hogy a normális testhőmérséklet általában 37°C. Orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy ez nem így van. de kiderült, hogy a testhőmérséklet hasonló a A vérnyomás személyenként változik. a testhőmérséklet normál tartománya között 35,5°C és 37,8°C. A szájon mért érték általában körülbelül 0,5°C-kal alacsonyabb, mint a végbélben mért érték.
- Az infravörös homlokhőmérő a homlokon méri a hőmérsékletet. a mért hőmérséklet a leggyakoribb referenciaértékhez viszonyítva, A testhőmérséklet orális mérése. Egyes embereknél Ez a hőmérséklet nem feltétlenül egyezik meg a szájon mért hőmérséklettel. Hőmérséklet.

Infravörös homlokhőmérő DT-8807S k

Tehát: A gyakorlás fontos!

- Javasoljuk, hogy a hőmérőt akkor fogja meg, amikor hogy egészséges állapotban gyakorolj magad és családod érdekében. Szóval Fejlesztheted a technikádat és profitálhatsz belőle Minden családtagnak van egy referenciaértéke a normális testhőmérséklethez. Ez segíthet betegség esetén. nagyobb biztonság.

5. Ismerd meg a készüléket!

5.1 Alkatrészek (1. ábra)

A 1: Infravörös érzékelő

A 2: Elemtartó rekesz

A 3: LED kijelző

A 4: Rendetlen íz

5.2 Kijelző (2. ábra)

B 1: A testhőmérséklet mérésének szimbóluma

B 2: Felületi hőmérsékletmérés szimbóluma

B 3: Hőmérsékletkijelző °F

B 4: Hőmérsékletkijelző °C

B 5: Hőmérsékletkijelző

B 6: Akkumulátorjel

6. Üzembe helyezés

- Az elemtartó rekesz a hátulján található Készülék. Nyissa ki az elemtartót a fedél lefelé csúsztatásával. • Helyezzen be két új 1,5 V-os AAA elemet, ügyelve a helyes polaritásra. • Az elemek behelyezése után a készülék automatikusan belép a hőmérséklet mértékegységének beállítási módba. • Kétszer szípol, és a °C villogni kezd. Nyomja meg a

Nyomja meg röviden a mérés gombot a Celsius (°C) és a Celsius (°C) közötti váltáshoz.

Válassza ki a Fahrenheit (°F) fokot hőmérsékleti mértékegységként, miközben a kijelző villog. A kiválasztás megerősítéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig a mérés gombot. A készülék kikapcsol. Ha nem változtatnak a beállításokon, a készülék körülbelül 30 másodperc múlva ismét kikapcsol. automatikusan. Az alapértelmezett beállítás °C.

Infravörös homlokhőmérő DT-8807S k

- Zárja vissza az elemtartó rekeszt. A fedél a helyén van.
Akkor van megfelelően behelyezve a házba, ha kattánást hall.

7. Működés

7.1 Testhőmérséklet mérése a homlokon (2. ábra)

- Sportolás, fürdés vagy étkezés után azonnal
Ne végezzen méréseket. Várjon körülbelül 30 percet!
- A hőmérőnek és a mért személynek is
Kérjük, a mérés előtt legalább 15 perccel legyen a szobában.
ugyanazon a térben, állandó környezeti feltételek mellett.
- Mindig győződjön meg arról, hogy az érzékelő tiszta és sértetlen.
- Tisztítsd meg a homlokodról az izzadságot, a sminket stb.
- Most tartsa a mérőérzékelőt kb.
1-4 cm távolságra egy megfelelő mérési ponttól a homlok közepén.
- Tartsa a készüléket stabilan ebben a helyzetben, és nyomja meg a mérés gombot. « - - - » jelenik meg.
- A mérés befejezése után, körülbelül 1 másodperc múlva, egy sípoló hang hallatszik.
Egy sípoló hang hallatszik. A készülék most a testhőmérséklet mérésének szimbólumát (alapértelmezett beállítás) és a mért hőmérsékletet jeleníti meg. Ha a mért hőmérséklet a megadott tartományon belül van,
32°C alatt LO felirat jelenik meg. 32°C feletti hőmérsékleten
A 42°C HI-ként jelenik meg.
- A készülék körülbelül 7 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.
Kikapcsol, ha nem nyomnak meg gombot.
- A pontos mérésekhez időbeli pontossággal kell...
Mindig ugyanazon a helyen mérje a hőmérsékletet.

NE FELEJTSD EL:
- A homlokon mért hőmérséklet megfelel a
Szájban mért testhőmérséklet. A szájban mért hőmérséklet általában körülbelül 0,5°C-kal alacsonyabb, mint a rektálisan mért érték.
Ez a népesség átlagára vonatkozik. Egyesek számára...
Az emberek eltérően reagálhatnak. Ezért fontos...
már a homlokhőmérő használatában
egészséges állapotban gyakorolni.
- Alternatív megoldásként a testhőmérsékletet is megmérheti
Fülpercing, a fülcimpán vagy a hónalj alatt
annak.

Infravörös homlokhőmérő DT-8807S k

7.2 A felületi hőmérséklet mérése

- Bekapcsolás után tartsa lenyomva a mérés gombot.

Megnyomva. A testhőmérséklet mérésének szimbóluma.
villog. Röviden nyomja meg a mérés gombot. A szimbólum a következőhöz kapcsolódik:
A felületi hőmérséklet mérése villog. Tartsa a
A kiválasztáshoz tartsa lenyomva a mérés gombot 3 másodpercig.
hogy megerősítse.
- Figyelem: Ha nem végez beállítást, a [nem tiszta] jelzés villog.
A szimbólum továbbra is látható. A készülék nem kapcsol ki automatikusan.
- Most egyszerűen irányítsa a mérendő tárgyat, és nyomja meg a mérés gombot. A mérés körülbelül 1 másodperc múlva befejeződik.
Ha befejeződött, egy hangjelzés hallható. A készülék most a következőt mutatja:
A felületi hőmérséklet mérésének szimbóluma és a
A mért hőmérséklet megjelenik a kijelzőn. Ha a mért hőmérséklet a 0...
60°C tartományon kívül esik, az OL felirat jelenik meg.

Kérjük, vegye figyelembe:
- Ez a mód a tényleges és a módosítatlan
Felületi hőmérséklet, amely eltér a testhőmérséklettől.
- A lehető legpontosabb hőmérséklet-leolvasás érdekében a
cél tárgynak a lehető legközelebb kell lennie
hogy célba vegyék.
- A készülék nem alkalmas fényes vagy polírozott fémfelületek
(rozsdamentes acél, alumínium) mérésére.
alkalmas.
- Az eszköz nem hatolhat be átlátszó felületekbe
Nem üvegen vagy műanyagon keresztül méri a hőmérsékletet.
Ehelyett az átlátszó felület hőmérsékletét méri.

8. Tisztítás és karbantartás

- Az érzékelő az infravörös hőmérő legérzékenyebb része. Kérjük,
védje az érzékelőt a szennyeződéstől. • Tisztításhoz használjon
alkoholba
(70-75%) átitatott vattapálcikát.
- Hagyja az érzékelőt legalább 1 percig teljesen megszáradni.

Infravörös homlokhőmérő DT-8807S k

- A készülék többi részét puha ruhával tisztítsa.
Használjon enyhén nedves ruhát. Ne használjon súrolószereket vagy oldószereket!
- Ha hosszabb ideig fogja használni a készüléket, vegye ki az elemeket. Ne vesztesed az idődet.

8.1 Elemcsere

- Amikor megjelenik az elem szimbóluma, kérjük, cserélje ki az elemeket.
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy az eszköz ki van kapcsolva az elemcsere során!
- Kérjük, kövesse az „Üzembe helyezés” fejezetben található utasításokat.

9. Problémamegoldás

Jelentés megjelenítése	Eljárás
Nincs hirdetés	Mérőeszközzel ellátott eszköz Kapcsolja be Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással Cserélje ki az elemeket
Helytelen kijelző	Távolítsa el a Elemek, várj! 1 perc és kezdés Újra szereled fel a készüléket Elemek cseréje
SZIA	Testhőmérséklet - Kérjük, válassza ki a Módus: Kiállítási tárgy belül- A részletek mért fele- A hőmérséklet ionokból származik +42°C-nál magasabb (38,6°C)
AZT	Testhőmérséklet - Kérjük, válassza ki a Módus: Kiállítási tárgy belül- A részletek mért fele- A hőmérséklet ionokból származik 32°C-nál (89,6°F-nál) alacsonyabb hőmérsékleten

Infravörös homlokhőmérő DT-8807S k

OL	A felület beállításainál Kérjük, válassza ki a Hőmérséklet mód: A mért tárgy a specifikációkon hőmérséklet a belül van - A mért megadott tartományon belül van. a 0...60°C (32... 140°F) mérési tartományon kívül
----	---

Ha a készülék ezen intézkedések ellenére sem működik

Ha nem működik, vedd fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, ahol vásároltad megvásárolták a terméket.

10. Ártalmatlanítás

Ez a termék kiváló minőségű anyagok felhasználásával készült.

Az anyagok és alkatrészek újrahasznosított anyagokból készülnek, újra felhasználható.



Elemeket és újratölthető akkumulátorokat soha nem szabad a Háztartási hulladék!

Fogyasztóként törvényi kötelessége a használt elemeket és akkumulátorokat környezetbarát ártalmatlanítás céljából visszavinni a kereskedőkhöz. a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően.

A nehézfémek megnevezése: Cd=kadmium, Hg=higany,

Pb=Pelenka



Ez a készülék megfelel az EU irányelveinek. elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) ártalmatlanítására jelölve.

Ezt a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. megfelelően kell ártalmatlanítani. A felhasználó köteles... a régi készüléket környezetbarát módon ártalmatlanítani egy kijelölt gyűjtőhelyen elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására.

11. Műszaki adatok

Modell	DT-8807S
Típus	Infravörös hőmérő

Infravörös homlokhőmérő DT-8807S k

Testhőmérséklet mód

Mérési tartomány 32,0...42,0°C
(35,6...47,6°C)

pontosság $\pm 0,3^\circ\text{C}$ ($\pm 0,5^\circ\text{F}$)

Felületi hőmérséklet mód

Mérési tartomány 0...60°C (32...140°F)

felbontás 0,1 °C (0,1 °F)

Tárolási feltételek Hőmérséklet:
-20°C...+50°C
(-4°F...122°F)
Páratartalom: <85%
relatív páratartalom

Szállítási feltételek Hőmérséklet:
-10...+60°C/14...140°F
Páratartalom: <85%
relatív páratartalom

Üzemeltetési feltételek
használat közben Hőmérséklet:
15°C...35°C (59...95°F)
Páratartalom: <85% relatív
páratartalom

Mérési időtartam Kb. 1 másodperc

Automatikus kikapcsolás körülbelül 7 másodperc elteltével

IP-védelmi osztály IPX0

Elemek 2 db 1,5 V-os AAA elem (nem tartozék)

Átlagos
Akkumulátor élettartama >1000 mérés

Átlagos
élet 4000 mérés

Infravörös homlokhőmérő DT-8807S k

Ház méretei 35 × 146 × 35 mm

Súly 69 g (csak a készülék)

Szabványokra való hivatkozás Megfelel a szabványoknak
ASTM E1965-98,
EN ISO 80601-2-56,
IEC/EN 60601-1-2 (EMV),
IEC/EN 60601-1 (Biztonság),
IEC/EN 60601-1-11

Ez az eszköz megfelel az orvostechikai eszközökről szóló
93/42/EGK irányelv követelményeinek.

12. Piktogramok magyarázata



Európai Megfelelőségi Nyilatkozat,
Bejelentett szervezet száma



Áramütés elleni védelem fokozata: BF típus




Kérjük, kövesse a használati utasítást.



Tárolási feltételek:
Hőmérséklet: -20 °C...+50 °C
Páratartalom: < 85% relatív páratartalom



Üzemeltetési feltételek:
Hőmérséklet: +15 °C...+35 °C
Páratartalom: < 85% relatív páratartalom

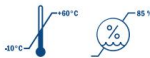

Szállítási feltételek:
Hőmérséklet: -10...+60°C
Páratartalom: < 85% relatív páratartalom



Gyártó: Shenzhen Everbest Machinery Industry
Co., Ltd., 19. épület, 5. régió, Baiwangxin
Ipai Park, Songbai Road, Baimang, Xili, Nanshan,
Shenzhen, Kína PC 518108



EU képviselő: Lotus NL BV
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, Hága,
Hollandia

Infravörös homlokhőmérő DT-8807S k

Importőr:

TFA Dostmann GmbH & Co.KG

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Németország

Ezeket az utasításokat vagy azok részleteit csak a beleegyezésével lehet felhasználni.

A TFA Dostmann teszi közzé a műszaki adatokat. A műszaki adatok a nyomtatás időpontjában érvényes állapotot tükrözik, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A termék legfrissebb műszaki adatai és információi

A cikkszám megadásával megtalálhatja a honlapunkon.
a keresőmező.

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

Kínában készült

2020.11. D/GB

Infravörös homlokhőmérő DT- 8807S

Köszönjük, hogy ezt a TFA készüléket választotta.

Ez a termék a legújabb infravörös technológián alapul, és Testhőmérséklet, valamint felületi hőmérséklet mérésére is használható. A hőmérsékletmérés érintésmentes, egyszerű és gyors.

1. A termék használata előtt

-  Kérjük, győződjön meg róla, hogy elolvasta a használati útmutatót gondosan.
- Ez az információ segít megismerkedni az új készülékével, hogy megismerkedjen az összes funkciójával és alkatrészek, hogy megtudja az első használatl kapcsolatos fontos részleteket és hogyan kell kezelni, valamint tanácsot kérni esetleges hiba esetén egy meghibásodás.
- A kézikönyvben található utasítások betartása és betartása megakadályozza a hangszer károsodását és a veszteséget a következőkből eredő hibákból eredő törvényes jogairól helytelen használat.
- Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, amely a következő okból keletkezik: ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért. • Hasonlóképpen nem vállalunk felelősséget a helytelen leolvasásokért vagy az azokból eredő bármilyen következményért őket.
- Kérjük, különösen vegye figyelembe a biztonsági tanácsokat!
- Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót a jövőbeni felhasználás céljából. referencia.

2. Szállítási tartalom

- DT-8807S infravörös homlokhőmérő • Használati utasítás

3. Az Ön biztonsága érdekében

- A hőmérőt otthoni használatra tervezték.
- A terméket kizárólag a leírásban leírtak szerint szabad használni ezt az utasítást. •

Minden mérés előtt ellenőrizze a hőmérőt, hogy bármilyen sérülés jele. Csak sértetlen állapotban használja a készüléket. Engedély nélküli javítások, módosítások vagy változtatások a termék tilos.

- Működés erős elektromágneses mezőkben, például a következő mobiltelefonhoz, meghibásodáshoz vezethet. Használat közben legalább 3,3 méter távolságot kell tartani az ilyen eszközöktől. ezt az eszközt.

Infravörös homlokhőmérő DT- 8807S

- A sípolásig eltelt minimális mérési időnek kivétel nélkül fenntartva. • Beszélje meg orvosával a mért értékeket. • A homlokerületen mért hőmérséklet eltér a maghőmérsékletből, amelyet a következőképpen kapunk meg: Szájüregi vagy végbélnyíláson keresztüli mérés klinikai hőmérővel.
- Ellenőrizze a mérési eredményt hagyományos klinikai készülékkel, kcal hőmérő:
 1. ha először használja a hőmérőt, vagy még nem ismered a helyes használatát eszköz
 2. ha a mérési eredmény meglepően alacsony, és nem felel meg az egészségi állapotnak
 3. újszülöttek számára 6 hónapos korig 4. olyan személyek, különösen kisgyermekek számára, akik reagálnak szokatlanul láz jelenlétében.

Vigyázat!

Sérülésveszély:

- A hangszer apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a gyermekek véletlenül lenyelhetnek. Tartsa a hangszert és az elemeket gyermekek elől elzárva tartandó. Használat alatt használható. szülői felügyelet.
- Az akkumulátorok káros savakat tartalmaznak, és veszélyesek lehetnek, ha lenyelt elemet. Ha gyanítja, hogy lenyelhetett egy elemet lenyelik vagy más módon a szervezetbe kerül, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- Az elemeket tilos tűzbe dobni, rövidre zárnai, szétszerelve vagy újratöltve. Robbanásveszély!
- A lemerült elemeket a lehető leghamarabb ki kell cserélni szívárgás okozta károk elkerülése érdekében. Soha ne használjon együtt régi és új elemeket, illetve azonos típusú elemeket. különböző típusok. • Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és biztonsági védőszemüveget, amikor szívárgó elemeket kezel.

Fontos információk a termékbiztonságról!

- Ne helyezze a készüléket szélsőséges hőmérséklet közelébe, rezgések vagy ütések.
- Óvja a készüléket a nagy vagy hirtelen környezeti hőmérséklet-változásoktól.

18 days

Infravörös homlokhőmérő DT- 8807S

- A gőz, por, füst stb. akadályozhatja a pontos mérést azáltal, hogy eltakarja a készülék optikáját. • A készülék nem vízálló. Védje a nedvességtől.
Ne merítse vízbe vagy más folyadékba. • A készülék tisztításához és fertőtlenítéséhez kövesse az „Ápolás és karbantartás” című részben található utasításokat.

4. Mérési eljárás

- Minden tárgy infravörös energiát bocsát ki. Az optikai detektor érzékeli az infravörös energiát, és átalakítja ezt az információt digitális leolvasást végez, és megjelenik a felületi hőmérséklet.

4.1 Testhőmérséklet mérése

- Alapértelmezett beállításban, testhőmérséklet-módban, a A hőmérő az infravörös hőmérsékletet méri a homlok alatti artériás vérellátás által leadott hő, és ezt a hőmérsékletet orális hőmérsékletté alakítja egyenértékű hőmérséklet. A mérési eredmény 1 másodpercen belül megjelenik. Az érintésmentes mérés
A módszer lehetővé teszi például a hőmérséklet mérését babák anélkül, hogy megzavarnák őket alvás közben.
- Sokan úgy vélik, hogy a normális testhőmérséklet 37°C, azonban a testhőmérséklet, akárcsak a vérnyomás, személyenként és a nap folyamán változik. Lehet 35,5°C (95,9°F) és 37,8°C (100,4°F) között mozog. • Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a szájban mért hőmérséklet normális esetben 0,5°C-kal (0,9°F-tal) alacsonyabb a végbélhőmérsékletnél. A homlokhőmérsékletet a infravörös homlokhőmérő a gyakran használthoz szájhőmérséklet. Egyes embereknél ez némileg mutathat eltérés a normál orális hőmérsékletüktől.

Tehát: A gyakorlás fontos!

- Javasoljuk, hogy egészséges állapotban gyakorolja a hőmérő használatát magán és családján.
állapotban. Így fejlesztheted a technikádat és megkapja a család minden tagjának normál testhőmérsékletére vonatkozó referenciaértéket. Ez viszont segíteni fog segít abban, hogy magabiztosabban mérhesd a lázadat amikor valaki beteg.

19

Infravörös homlokhőmérő DT- 8807S

5. Ismerd meg a készüléket!

5.1 Elemek (1. ábra)

A 1: Infravörös érzékelő

A 2: Elemtartó rekesz

A 3: LED kijelző

A 4: Mérőgomb

5.2 Kijelző (2. ábra)

B 1: A testhőmérséklet-mérési mód szimbóluma

B 2: Felületi hőmérséklet mód szimbóluma

B 3: Hőmérsékletkijelző °F

B 4: Hőmérsékletkijelző °C

B 5: Hőmérsékletkijelző B 6:

Akkumulátor szimbólum

6. Első lépések

- Az elemtartó rekesz a hátulján található eszközt. Nyissa ki az elemtartót a fedél elcsúsztatásával. akkumulátorfedél leengedve.
- Helyezzen be két új, 1,5 V-os AAA elemet a megfelelő pozícióban. polaritás.
- Az elemek behelyezése után a készülék automatikusan belép a hőmérséklet mértékegységének beállítási módba. Hallani fogja a két sípoló hang hallatszik, és a °C villog. Nyomja meg röviden a mérési gombot a Celsius (°C) és a Fahrenheit közötti választáshoz. (°F) hőmérsékleti mértékegységként, miközben a kijelző villog. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mérőgombot 3 másodpercig a erősítse meg a kiválasztást. A készülék kikapcsol. Ha mégis megteszi Ha nem végez semmilyen beállítást, a készülék kb. 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Az alapértelmezett beállítás °C. • Zárja vissza az elemtartó rekeszt. Amint kattanást hall, a fedél megfelelően a helyére került a házban.

7. Működés

7.1 Testhőmérséklet mérése a homlokon (2. ábra)

- Kerülje a mérést 30 percnél rövidebb időn belül testmozgás, fürdés vagy étkezés. • A hőmérőnek és a mérendő személynek is ugyanabban a szobában tartózkodni állandó környezeti feltételek mellett legalább 15 perccel a mérés előtt.
- Mindig győződjön meg arról, hogy az érzékelő tiszta és nem sérült.
- Tisztítsa meg a homlokát az izzadságtól, sminktől stb.

Infravörös homlokhőmérő DT- 8807S

- Most irányítsa a mérőérzékelőt egy megfelelő mérési pontra folt a homlok közepén, körülbelül 1-4 cm.
- Tartsa stabilan ebben a helyzetben, és nyomja meg a mérőgombot gombot. A kijelzőn a «---» jelzés látható.
- A mérés befejezése után sípoló hang hallatszik. kb. 1 másodperc múlva. A készülék most a testhőmérséklet-mérési mód szimbólumát (alapértelmezett mód) és a mért hőmérséklet. Ha a mért hőmérséklet alacsonyabb 32°C-nál magasabb hőmérséklet esetén LO felirat jelenik meg. 42°C felett a HI jelzés jelenik meg. • A készülék kb. 7 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem nyomnak meg gombot.
- Az ismételt pontos mérések érdekében mindig mérjen ugyanazon a helyen.

NE FELEJTSD EL:

- A homlok hőmérséklete megegyezik a szájhőmérséklettel (a szájhőmérséklet általában 0,5°C-kal alacsonyabb, mint a végbélhőmérséklet) mért hőmérséklet.) Ez az átlagon alapul népszerűség. Egyes embereknél ez más lehet, és ez Ajánlott egészségesen megtanulni és felismerni a homlokhőmérsékletet.
- Alternatív megoldásként a testhőmérsékletet a fülnyílásban, a fülcimpán vagy a hónalj alatt is megmérheti.

7.2 Felületi hőmérséklet mérése

- Bekapcsolás után nyomja meg és tartsa lenyomva a mérési gombot. A testhőmérséklet mód szimbóluma villog. Nyomja meg röviden a mérési gombot. A felületi hőmérséklet mód szimbóluma villog. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a mérési gombot 3 másodpercig.
 - Figyelem: Ha nem végez semmilyen beállítást, a szimbólum továbbra is villog. A készülék nem kapcsol ki automatikusan.
 - Egyszerűen irányítsa a célpontot, és nyomja meg a mérési gombot. A mérés befejezése után, körülbelül 1 másodperc múlva sípoló hang hallatszik. A készülék most a következőt mutatja: a felületi hőmérséklet mód szimbóluma és a mért hőmérséklet.
- Jegyzet:
- Ez a mód a tényleges és a módosítottan felületet mutatja hőmérséklet, amely eltér a testhőmérséklettől.

Infravörös homlokhőmérő DT- 8807S

- A legpontosabb hőmérséklet-leolvasás érdekében célozza meg a célpontot a lehető legközelebb.
- Nem alkalmas fényes vagy polírozott fémfelületek mérésére felületek (rozsdamentes acél, alumínium stb.).
- A készülék nem tud átlátszó felületeken, például üvegen vagy műanyagon keresztül mérni. Ehelyett az üveg felületi hőmérsékletét méri.

8. Ápolás és karbantartás • Az

- érzékelő az infravörös hőmérő legérzékenyebb része. Kérjük, védje az érzékelő részt a szennyeződésektől. • Tisztításhoz használjon nedves vattapálcikát orvosi alkohol (70-75%).
- Hagyja az érzékelőt legalább 1 percre teljesen megszáradni.
 - A készülék többi részét puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószereket vagy súrolószereket.
 - Vegye ki az elemeket, ha nem fogja használni a készüléket. Készüléket hosszú ideig.

8.1 Elemcsere

- Cserélje ki az elemeket, amikor megjelenik az elem szimbólum a kijelzőn.
- Az elemek cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Kérjük, kövesse a „Megszedés” című részben található utasításokat. elkezdődött”.

9. Hibaelhárítás

Kijelző probléma	Megoldás
Nincs kijelző	Nyomja meg a mérési gombot a készülék bekapcsolásához Győződjön meg az elemek polaritásának helyességéről Cserélje ki az elemeket
Helytelen kijelző	Vegye ki az elemeket, várjon 1 percet, majd indítsa újra a készüléket Cserélje ki az elemeket

Infravörös homlokhőmérő DT- 8807S

SZIA

Testhőmérséklet esetén Kérjük, válassza ki a módot:
cél a megadott tartományon belül
Hőmérsékleten mért kationok
magasabb, mint +42°C
(107,6°F)

AZT

Testhőmérséklet mérése Kérjük, válassza ki a módban:
célpontot a megadott
Hőmérsékleten mért kationok
alacsonyabb, mint +32°C
(89,6°F)

OL

Felszíni módban: Kérjük, válassza ki a A mért hőmérséklet a
specifikációkon belüli cél
0...60°C (32...140°F)
tartományon
kívül esik

Ha a készülék ezen intézkedések ellenére sem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval, akitől vásárolta a

termék a következő terméktől:

10. Hulladékkezelés

Ez a termék kiváló minőségű anyagok felhasználásával készült újrahasznosítható anyagok és alkatrészek,

újrahasznosított.



Az üres elemeket és az újratölthető akkumulátorokat soha ne dobja a háztartási hulladékba. Fogyasztóként törvényileg köteles vagy vidd el őket a kiskereskedelmi üzletbe vagy a megfelelő gyűjtőhelyek a nemzeti vagy helyi előírásoktól függően szabályozásokat a környezet védelme érdekében.



A nehézfémek szimbólumai a következők: Cd=kadmium, Pb=ólom, Hg=higany

Ez a műszer a következő előírásoknak megfelelően van címkézve: az EU elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelve (WEEE).

Infravörös homlokhőmérő DT- 8807S

Kérjük, ne dobja ki ezt a műszert a következő hulladékgyűjtőbe:
háztartási hulladékot. A felhasználó köteles elvinni
az élettartamuk végére ért eszközöket kijelölt gyűjtőhelyre szállítsák
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékgyűjtő pontját a környezetbarát ártalmatlanítás
biztosítása érdekében.

11. Műszaki adatok

Modell	DT-8807S
Típus	Infravörös hőmérő
Testhőmérséklet mód	
Mérési tartomány	32,0...42,0°C (89,6...107,6°F)
Pontosság	±0,3°C (±0,5°F)
Felületi hőmérséklet mód	
Mérési tartomány	0...60°C (32...140°F)
Felbontás	0,1 °C (0,1 °F)
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: -20°C...+50°C (-4°F...122°F) Páratartalom: < 85% relatív páratartalom
Szállítási feltételek	Hőmérséklet: -10...+60°C (14...140°F) Páratartalom: < 85% relatív páratartalom
Használati környezeti feltételek	Hőmérséklet: 15°C...35°C (59...95°F) Páratartalom: < 85% relatív páratartalom
Mérés időtartama	Körülbelül 1 másodperc
Automatikus kikapcsolás	Körülbelül 1 perc múlva

Infravörös homlokhőmérő DT- 8807S

IP-védelmi osztály	IPX0
Elemek	2 x 1,5 V AAA elem (nem tartozék)
Átlagos akkumulátor-üzemidő	>1000 mérés
Várható élettartam	4000 mérés
Méret	35 × 146 × 35 mm
Súly	69 g (csak a műszer)
Szabványokra való hivatkozás	Megfelel a következőknek: ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56, IEC/EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EN60601-1 (biztonsági) szabványok, IEC/EN 60601-1-11

Ez az eszköz megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/
EGK irányelv követelményeinek.

12. Jelmagyarázat



Európai megfelelőségi nyilatkozat, darabszám
a bejelentett szervezet




A készülék megfelel a BF védelmi osztálynak




Tekintse meg a használati utasítást



Tárolási feltételek:
Hőmérséklet: -20°C...+50°C (-4°F...122°F)
Páratartalom: < 85% relatív páratartalom

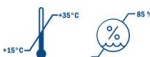

Használati környezeti feltételek:
Hőmérséklet: 15°C...35°C (59...95°F)
Páratartalom: < 85% relatív páratartalom

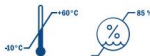

Szállítási feltételek:
Hőmérséklet: -10...+60°C (14...140°F)
Páratartalom: < 85% relatív páratartalom

Infravörös homlokhőmérő DT- 8807S



Gyártó: Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd., 19. épület, 5. régió, Baiwangxin ipari park, Songbai út, Baimeang, Xili, Nanshan, Shenzhen, Kína PC 518108



EU képviselő: Lotus NL BV
Koningin Julianaplein 10, 1st Floor,
2595AA, Hága, Hollandia

Importőr:

TFA Dostmann GmbH & Co.KG

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Németország

A kézikönyv egyetlen részét sem szabad a szerző írásbeli hozzájárulása nélkül reprodukálni.

TFA Dostmann. A műszaki adatok a lap megtekintésének időpontjában helyesek.
nyomtatott és előzetes értesítés nélkül változhat.

A termékkel kapcsolatos legfrissebb műszaki adatok és információk a megtalálja honlapunkon, egyszerűen a termékszám megadásával a keresőmező.

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

Kínában készült

2020.11. D/GB